

Rotační vakuová odparka RVO 004 C

Rotační vakuová odparka RVO 004 C je cenově dostupná varianta RVO. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Přístroj se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a kompaktními rozměry, úroveň ovládání plně odpovídá základním potřebám. I pro tento model odparky lze použít ochranný štít.

- otáčky a teplota lázně snadno analogově řízeny
- ohřívací lázeň na přístroji nezávislá, samostatný přívod elektrické energie
- ruční polohování odpařovací baňky
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- robustní systém zajištění odpařovací baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 20 mm)
- osu chladiče lze snadno a definovaně naklánět

RVO 004


Vakuové odparky řady RVO 004 jsou maximálně jednoduché přístroje vybavené systémem bezpečného nakládání, mechanickým výtahem aparatury a na přání i přesným systémem regulace teploty lázně.

Ruční výtah lázně

Mechanická kontrola rychlosti otáček

Regulace vodní lázně

Možno vybrat s přesností $\pm 5^\circ\text{C}$ (verze standard) nebo $\pm 2^\circ\text{C}$ (verze control).

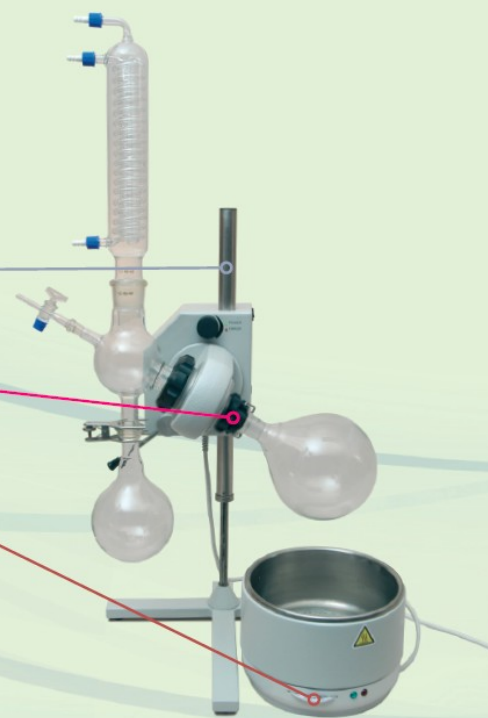

Technické údaje:

Použití odpařovacích baněk:	20 ... 4000 ml
Teplota lázně:	max. $+100^\circ\text{C}$
Přesnost regulace teploty:	$\pm 2^\circ\text{C}$
Napájecí napětí:	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Příkon:	max. 2000 VA
Hmotnost skla:	8 kg
Rozměry včetně/bez skla (v x š x h):	950 x 600 x 390 mm/750 x 450 x 390 mm