

MUFLOVÁ LABORATORNÍ PEC LMH

Speciálně navržená pro testování agresivních vsázek

Topné spirály jsou mimo komoru pece kryté odolnou keramickou muflí, takže se k nim agresivní zplodiny ani nedostanou. Pec je navíc chráněná i odvětráváním, které zabraňuje kondenzaci par při výpalu.

Rychlý náběh na Tmax

Rovnoměrné rozložení teploty

Mechanická odolnost

Chemická odolnost



Jednoduché ovládání i instalace



Atypické úpravy



Expedice už do 2 dnů



Bezhluknost



Záruka 36 měsíců



Okamžitá technická podpora



LMH 07/12

Standardní vybavení:

- regulátor Ht40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- topná spirála navinutá na muflí, mimo pracovní prostor pece
- muflé izolovaná rohoží z minerálního vlákna
- portál dveří z žáruvzdorných cihel
- větrací komínek pro odvětrání pracovního prostoru pece
- v průzoru dveří ochranné sklo
- termočlánek typu „S“
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
- koncový spínač pro bezpečné otevření dveří
- ručně otevírané dveře směrem nahoru
- stolní provedení

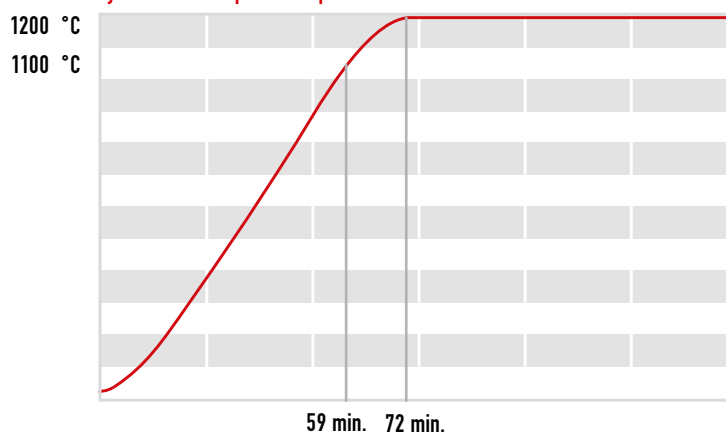
Příslušenství za příplatek:

- regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programů po 15 krocích)
- injektor s odťahovým ventilátorem a přerušovačem tahu (pouze s regulátorem HtIndustry / Ht205)
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky ovládaný přívod plynu)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci příslušenství za příplatek je nutná konzultace s technickou kanceláří.



LMH 07/12

Rychlost náběhu pece na teplotu

Větrací komínek pro odvětrání pracovního prostoru pece



Termočlánek a větrací komínek v komoře pece



Izolace dveří pece s průzorem pro kontrolu vsázky

Typ pece	Tmax	Tmax pro dlouhodobý provoz	Objem	Vnější rozměry (šxvxdh)	Vnitřní rozměry (šxvxdh)	Příkon	Hmotnost	Jištění *	Napětí	Max. nosnost dna
	°C	°C	l	mm	mm	kW	kg		V	kg
LMH 04/12	1200	1100	4	490x570x680	170x90x275	3,0	42	16/1	230	10
LMH 07/12	1200	1100	7	490x570x680	170x170x275	3,0	48	16/1	230	10
LMH 11/12	1200	1100	11	580x570x680	255x165x255	3,5	52	16/1	230	15

* Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.

Technické změny vyhrazeny.