

LABORATORNÍ KOMOROVÁ PEC L

Univerzální laboratorní pomocník, který zvládne i náročnější provoz

V laboratořích všeho druhu oceníte všestrannost tohoto zařízení. Díky topným spirálám ukrytým v keramických deskách je pec částečně chráněná proti mechanickému i chemickému poškození. Pece L mají větrací komínky pro odvod zplodin, nejsou však vhodné pro pyrolýzu. Kvalitní konstrukce a použité materiály zaručují, že pece L zvládnou i náročnější provoz.

Rychlý náběh na Tmax

Rovnoměrné rozložení teploty

Univerzální použití



Jednoduché ovládání i instalace



Atypické úpravy



Expedice už do 2 dnů



Bezhluknost



Záruka 24 měsíců



Okamžitá technická podpora



Zakázkové zařízení
pro speciální aplikace
vycházející z této pece
najdete na straně 45
v tomto katalogu.

Standardní vybavení:

- regulátor Ht40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- topné elementy v keramických panelech
- izolace deskami z minerálního vlákna
- větrací komínek pro odvětrání pracovního prostoru pece
- termočlánek typu „S“
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
- koncový spínač pro bezpečné otevření pece
- ručně otevírané dveře směrem dolů
- stolní provedení

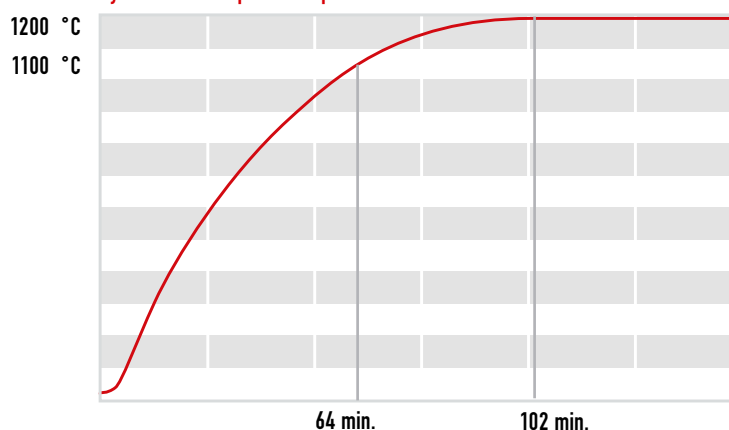
Příslušenství za příplatek:

- regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programů po 15 krocích)
- injektor s odtahovým ventilátorem a přerušovačem tahu (pouze s regulátorem HtIndustry / Ht205)
- ochranná deska dna
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky ovládaný přívod plynu)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)



L 03/12

Pozn.: Při kombinaci příslušenství za příplatek je nutná konzultace s technickou kanceláří.

Rychlost náběhu pece na teplotuTermočlánek v komoře pece
a odtahový komínekOdtahový komínek pro odtah zplodin
z komory pece

Typ pece	Tmax	Tmax pro dlouhodobý provoz	Objem	Vnější rozměry (šxvxdh)	Vnitřní rozměry (šxvxdh)	Příkon	Hmotnost	Jištění *	Napětí	Max. nosnost dna
	°C	°C	l	mm	mm	kW	kg		V	kg
L 03/12	1200	1100	3	380x440x400	180x100x140	1.2	20	16/1	230	4
L 05/12	1200	1100	5	430x470x430	230x130x170	2.4	26	16/1	230	6
L 09/12	1200	1100	9	430x505x500	230x170x240	3.0	30	16/1	230	6
L 15/12	1200	1100	15	450x505x600	250x170x340	3.5	40	16/1	230	6

* Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.

Technické změny vyhrazeny.